

歯周病ケアのための音波式電動歯ブラシ

ビブラートケア

# DENT.EX systema VibratoCare



### 特長 1

約 62 g の軽量スリムボディで持ちやすく、目的部位にしっかり毛先をコントロールできる

### 特長 2

「スーパーテーパード毛」が、歯と歯肉の境目をやさしく清掃

### 特長 3

手みがきでは実現できない、タテ（毛先）・ヨコ方向に振動する毛先の動き「マルチアクション」音波振動で歯周病をケア




コンパクト M ブラシ

コンパクト S ブラシ

ワンタフトブラシ

### ■マルチアクション音波振動によるブラシの動き

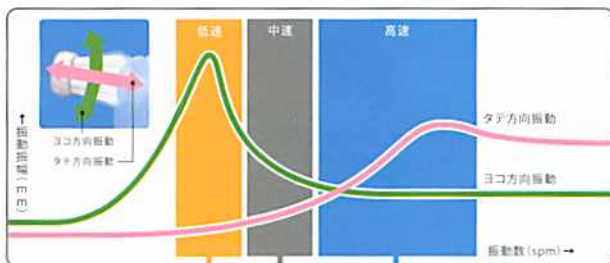

タテ・ヨコ方向の独自のマルチアクション音波振動でプラークを除去します。

さらに、振幅がより大きくなるスウィングモードで口腔内の部位や状態に合わせてブラッシングできます。

**ワイドスウィング**  
[WIDE SWING]

ヨコ方向に大きく振動します。振幅の大きさを利用してやさしくブラッシングするときにおすすめします。

**ノーマル**  
[NORMAL] 5段階速度切替

タテ(毛先)・ヨコ方向にバランスよく振動します。独自のマルチアクション音波振動でプラークを除去します。

**ポイントスウィング**  
[POINT SWING]

タテ(毛先)方向に大きく振動します。毛先の届きにくい部位をしっかりとかきだすようにブラッシングするときにおすすめします。

**マッサージスウィング**  
[MASSAGE SWING]

ワイドスウィングとポイントスウィングが短い周期で交互に動作します。歯ぐきのマッサージにおすすめします。

COMMENT

本製品は、タテ・ヨコ方向の「マルチアクション」音波振動で、細くしなやかな「スーパーテーパー毛」の毛先が歯周ポケットにやさしく届いてプラークを除去する、歯周病ケアのための電動歯ブラシです。

電動歯ブラシにおいても、手用歯ブラシの指導と同様に、患者さんの症状、口腔内状態、ブラッシングテクニックなどに合わせて適切な選択と指導をしていただきたいと思います。歯肉へのやさしさと磨き実感で使い分けられる2種類のコンパクトブラシ（スーパーテーパー毛）と、ワンタフトブラシ（通常毛）に、13,000～33,000回/分の3つの「スウィングモード」による7段階のきめ細かい速度切り替えとの組み合わせで、患者さんに適したブラッシングを幅広く指導することが可能です。併せて、これまでの電動歯ブラシでの「握り部が太くて重く、負担がかかり長続きしない」といった声にも配慮した「軽量スリム」設計になっています。

このように、本製品は幅広い「対応力」があるので、お子様から高齢者、審美補綴治療前の歯肉状態のコントロール、歯列矯正中のプラークコントロールなどにも活用いただけます。軽量スリムなので、ぜひご利用いただきたい電動歯ブラシです。

メーカー希望歯科医院価格●本体セット：8,100円（税別）  
替ブラシ（2本入）：680円（税別）（3種共通）  
メーカー希望患者価格●本体セット：9,975円（税込）  
替ブラシ（2本入）：840円（税込）（3種共通）  
本体セット内容●本体1台、充電器1台、取扱説明書（品質保証書付き）1部、替ブラシ3種各1本


ライオン歯科材料(株) 統括部  
遠藤和俊 Kazutoshi Endo  
製品についてのお問い合わせ：Tel 03-3621-6169  
ホームページ：http://www.lion-dent.com/

アンケート調査結果

「DENT.EX systema VibratoCare」を試用した歯科衛生士リサーチャー（計15名）に、以下の各項目について回答をお願いしました。

集計：豊山とえ子（聖母歯科医院・歯科衛生士）

Q1 本製品の軽さについてはいかがですか？

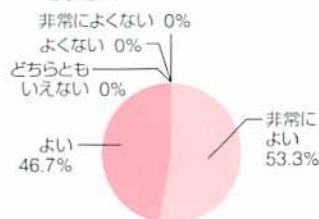

Q2 持ちやすさはいかがですか？



Q3 歯頸部に毛先が届く感じはいかがですか？




Q4 歯頸部のプラークが落ちている感じはいかがですか？



Q5 歯間部に毛先が届く感じはいかがですか？



Q6 歯間部のプラークが落ちている感じはいかがですか？

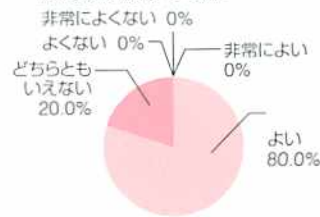

Q7 歯肉への毛先のあたり心地はいかがですか？



Q8 歯周病ケアのための電動歯ブラシとして適切だと思えますか？



Q9 本製品を患者さんに推奨しますか？

